

# Stifneck Select

## Select and Pedi-Select Extrication Collar

980010 Stifneck Select (Qty. 1)

980020 Stifneck Pedi-Select (Qty.1)

### Οδηγίες Χρήσης

Manufactured in China for:  
**LAERDAL MEDICAL AS, Norway**  
P.O. Box 377, N-4002 Stavanger, Norway  
Tel. +47 51 51 17 00,  
Fax +47 51 52 35 57

Distributed by:

**Canada and Latin America:**  
**LAERDAL MEDICAL CANADA LTD.**  
151 Nashdene Rd., Unit #45  
Toronto, ON, Canada, M1V 4C3  
Tel. +1 (416) 298-9600,  
Toll free 888/LAERDAL (523-7325)  
ou en français (800) 567-9987  
Fax +1 (416) 298-8016

**USA:**  
**LAERDAL MEDICAL CORPORATION**  
167 Myers Corners Road, P.O. Box 1840  
Wappingers Falls, New York 12590-8840  
Tel. (800) 431-1055, +1 (845) 297-7770  
Fax (800) 227-1143, +1 (845) 298-4545



Intended for single patient use.



The product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 93/42/EEC Medical Devices Directive.

U.S. Patent Nos. 5,795,315; 5,622,529, Other U.S. and International Patents Apply.

© 2005 Laerdal Medical AS. All Rights Reserved.




**Laerdal**

helping save lives

## Κολάρο Ακινητοποίησης Select και Pedi-Select

### 1 Μετρήστε τον ασθενή.

Ευθυγραμμίστε το κεφάλι σε ουδέτερη θέση ή θέση "μάτια μπροστά" εκτός εάν αντενδείκνυται από το πρωτόκολλό σας.

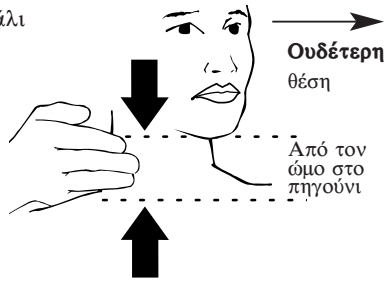


### 2 Προσαρμόστε το κολάρο στον ασθενή.

Select: Επιλέξτε από τις 4 θέσεις ενηλίκων.

Pedi-Select: Επιλέξτε από τις 3 θέσεις παιδιών.


Παράθυρο ρύθμισης μεγέθους.

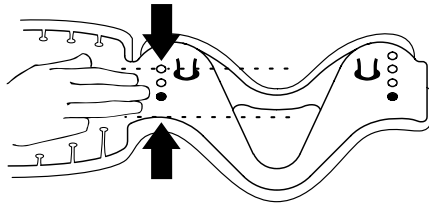

Ίδια μέθοδος ρύθμισης και για τα δύο κολάρα.


### 3 Ρυθμίστε (Adjust) και Κλειδώστε (Lock) το ρυθμιζόμενο κολάρο.

**Ρυθμίστε** την υποστήριξη του πηγουνιού με το μέγεθος που επιλέξατε στο βήμα 2.

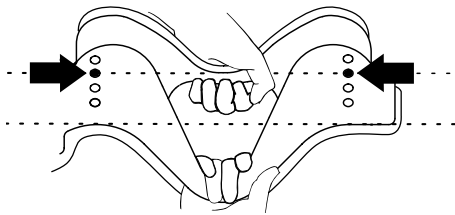


Ίδια μέθοδος για το Select και το Pedi-Select.

**Ασφαλίστε** τις δύο πλευρές, πιέζοντας τις δύο γλωττίδες.

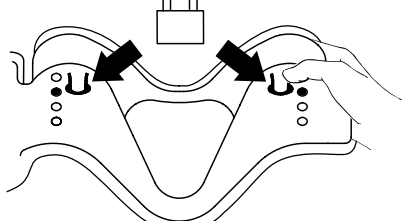


### 4 Μορφοποιείτε το κολάρο.

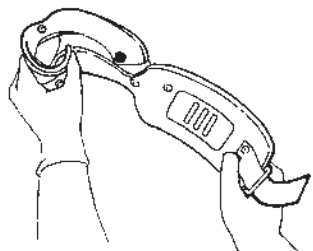

### 5 Εφαρμόστε το κολάρο, διατηρώντας το κεφάλι σε ουδέτερη θέση.



Τοποθετήστε την υποστήριξη του πηγουνιού στο πηγούνι. Εάν απαιτείται άλλο μέγεθος, αφαιρέστε το κολάρο και επαναριθμήστε.

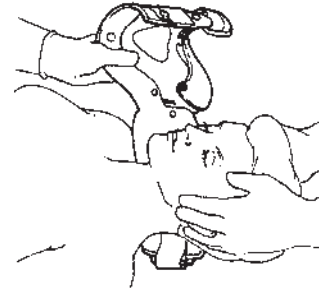

Για ασθενείς σε ύπτια θέση, σύρατε το πίσω μέρος του κολάρου πίσω από τον αυχένα, πριν εφαρμόσετε το στήριγμα πηγουνιού.

**Σημαντικό:** Μην ρυθμίζετε το κολάρο Select/Pedi-Select επάνω στον ασθενή.

**Αποθήκευση:** Μη φυλάσσετε το κολάρο διπλωμένο αλλά επίπεδο.

**Ορια θερμοκρασίας αποθήκευσης:**

-34 C – 52 C

(-30 F – 125 F)

**Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:**

-25 C – 43 C

(-13 F – 110 C)



Τραβήξτε το πίσω μέρος του κολάρου, κρατώντας το προστινό σταθερό. Συνδέστε.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Τα προϊόντα Stifneck πρέπει να χρησιμοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα. Εάν υπάρχει υποψία κάκωσης ΑΜΣΣ, η ακινητοποίηση με το κολάρο αποτελεί μόνο ένα μέρος του συστήματος ακινητοποίησης.

Είναι σημαντικό να ακινητοποιηθεί σωστά ο ασθενής προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση της ΣΣ (σύμφωνα με το τοπικό πρωτόκολλο).

Μην χρησιμοποιείτε κολάρο λανθασμένου μεγέθους. Ένα πολύ μεγάλο κολάρο μπορεί να προκαλέσει κάκωση της ΑΜΣΣ του ασθενή. Ένα πολύ μικρό κολάρο δεν παρέχει την κατάλληλη σταθερότητα. Διατίθενται ειδικά μεγέθη Stifneck για παιδιά και μικρόσωμα άτομα.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη σωστή χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

#### ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλώ δείτε στην Global Warranty τους όρους και τις προϋποθέσεις.

[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)



Προβλεπόμενη χρήση για έναν ασθενή



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές διατάξεις της οδηγίας 93/42/EOK περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.