



Laerdal®
helping save lives




Ρεαλιστική Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Nursing Anne

Η Nursing Anne είναι ένα πρόπλασμα για την κλινική εκπαίδευση που επικεντρώνεται σε πολλές δεξιότητες από τη βασική φροντίδα των ασθενών μέχρι προχωρημένες ιδεξιότητες νοσηλευτικής. Η Nursing Anne σε συνδυασμό με το σύστημα SimPad παρέχει μια εκπαιδευτική πλατφόρμα καλύπτοντας την υγεία των γυναικών, την αξιολόγηση του τραύματος και τη γενική φροντίδα των ασθενών.

www.vascomedical.gr

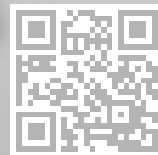

Nursing Anne

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

- Κεφάλι με ανατομικά σημάδια, τραχεία και οισοφάγο, μαί με προσομοιούμενους Α πνεύμονες και στομάχι, που επιτρέπουν την εξάσκηση σε πολλές δραστηριότητες
- Εκλυση υγρών από μάτια και αυτιά (προσομοιούμενο)
- Εφαρμογή / ενστάλαξη των φαρμάκων στο μάτι, το αυτί και τη μύτη συμπεριλαμβανομένης της ρινικής συσκευασίας
- Οδοντο-στοματική φροντίδα
- Εισαγωγή και αναρρόφηση στοματοφαρυγγικού και ρινοφαρυγγικού αεραγωγού
- Εισαγωγή, εξασφάλιση και φροντίδα ενδοτραχειακών σωλήνων
- Φροντίδα τραχειοστομίας και αναρρόφηση από τραχεία
- Πολλαπλές διαδικασίες χορήγησης οξυγόνου
- Εισαγωγή φροντίδα και αφαίρεση σωλήνων NG
- Πλύση στομάχου και διασωλήνωση
- Πλήρες εύρος κίνησης για ρεαλιστικό χειρισμό ασθενών
- Εφαρμόζονται τεχνικές επίδεσης στα δάκτυλα των χεριών
- Εναλλάξιμα στομία κολοστομίας, ειλεοστομίας και υπερηβικής κυστεοστομίας
- Κολοστομία με έκκριση υγρών και δυνατότητα μόνιμου καθετήρα

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ :

- Πλήρης ουροποιητικός καθετηριασμός
- Δυνατότητα σύνδεσης δεξαμενών υγρού σε ουροποιητικό και παχύ έντερο
- Γυναικεία γεννητικά όργανα ικανά για κολπική πλύση
- Διατήρηση μόνιμου ή άλλου είδους καθετήρα
- Μπορούν να εφαρμοστούν διαδικασίες κλύσματος με υγρό
- Οι ουροποιητικές βαλβίδες παρέχουν φυσική αντίσταση στην αίσθηση του καθετηριασμού
- Οι Πρωκτικές βαλβίδες προσομοιάζουν τον εσωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού

IV/IM ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :

- Αρθρωτό IV μπράτσο με δέρμα που μπορεί να αλλάξει και ρεαλιστικό σύστημα φλεβών που επιτρέπει τη περιφερική ενδοφλέβια φροντίδα
- Δυνατότητα φλεβοκέντησης προωλένιας κοιλότητας και τη ράχης του χεριού
- Προσβάσιμες φλέβες συμπεριλαμβανομένων μεσαίας, βασιλικής και κεφαλικής
- Υποδοχές τοποθέτησης υποκλείδιας, νηστιδοστομίας και Hickman καθετήρα
- Δυνατότητα ενδομυϊκών ενέσεων (μηνύ, δελτοειδή, γλουτιαίου)

ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ / ΠΑΛΜΟΙ:

- Ειδικό αρθρωτό μπράτσο για ακρόαση και ψηλάφηση παλμού.
- Ηχοί Korotkoff συγχρονισμένοι με το ΗΚΓ
- Ενταση ήχου Korotkoff 10 σταδίων, 0-9
- Συστολική, διαστολική πίεση ρυθμίζεται ξεχωριστά σε βήματα των 2 mmHg
- Συστολική 0-300 mmHG, Διαστολική 0-200 mmHG
- Auscultative Gap, με on/off λειτουργία
- Ακρίβεια μέτρησης πίεσης +/- 4 mmHG
- Λειτουργία βαθμονόμησης για ρύθμιση αισθητήρα πίεσης και μανομέτρου
- Ο προσομοιωτής παλμών ελέγχει brachial και radial παλμούς
- Οι παλμοί ενεργοποιούνται μόνο κατά την ψηλάφηση
- Οι παλμοί συγχρονίζονται με προγραμματιζόμενο ΗΚΓ
- Η ένταση των παλμών εξαρτάται από την πίεση του αίματος
- Καρδιακός παλμός που παράγεται χειροκίνητα

Λειτουργία

H Nursing Anne ελέγχεται από το SimPad® System και μπορεί να λειτουργήσει με ένα προαιρετικό μόνιτορ ασθενούς.

**** Το SimPad είναι απαραίτητο για τη λειτουργία και πωλείται ξεχωριστά****



Sim Center

Επισκεφτείτε το www.laerdal.com/simcenter για σεναρία εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας SimCenter™



Πρόσβαση σε επικυρωμένο, τυποποιημένο περιεχόμενο από εμπειρογνώμονες του κλάδου

SimManager™

Μια σειρά από online εργαλεία που σας επιτρέπουν την πλήρη βελτιστοποίηση ολόκληρης της λειτουργίας του κέντρου προσομοίωσης

SimView™

Μια λύση απολογισμού εκπαίδευσης που δίνει τη δυνατότητα αναλυτικής μελέτης των γεγονότων προσομοίωσης

ΗΧΟΙ:

- Καρδιακοί ήχοι συγχρονισμένοι με ΗΚΓ
- Αναγνωρίσιμοι ήχοι πνεύμονα συγχρονισμένοι με την αναπνοή 0 - 60 BPM
- Επιλογή ήχου στον ένα πνεύμονα
- Κανονικοί ή ανώμαλοι ήχοι του εντέρου
- Ηχοι Φωνής: ήχοι από υπολογιστή, από μαγνητοφώνηση και ήχοι σε πραγματικό χρόνο από τον εκπαιδευτή μέσω του ηχητικού συστήματος

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ:

- Όλες οι δραστηριότητες, τα ζωτικά σημεία και οι παρατηρήσεις του εκπαιδευτή καταγράφονται σε αρχεία για περαιτέρω ανάλυση της εκπαίδευσης. Τα αρχεία μπορούν να αναλυθούν είτε στην συσκευή είτε σε H/Y
- Φόρτωση αυτομάτων σεναρίων μέσω διαδικτύου από την πλατφόρμα SimStore

MONITOR ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ):

- Monitor ασθενούς με οθόνη αφής για παρουσίαση των ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς
- Η έγχρωμη οθόνη είναι ρυθμιζόμενη για να παρέχει πολλαπλές παραμέτρους προσομοίωσης, η κάθε μια από τις οποίες ενεργοποιεί διαφορετικά επίπεδα συναγερμών
- Οι παράμετροι προσομοίωσης περιλαμβάνουν HR, ECG, SpO2, BP, RR, Θερμοκρασία και etCO2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΕΛΙΑΣ:

325-05050 Nursing Anne

Περιλαμβάνει: : Κούκλα Ενήλικα (SimPad-capable), Ενδυση νοσοκομείου, Λιπαντικό αεραγωγού, Σετ τοποθέτησης, τσάντα μεταφοράς κ οδηγίες χρήσης



200-30001 SimPad System

Includes: SimPad, Link Box, 2 AC Power Supplies, Rechargeable Lithium-Ion Battery, Wrist Strap for SimPad, Manikin Strap for Link Box, Manikin Adapter Cable, SimPad Sleeve, USB Cable, Ethernet Cable and Directions for Use.

Αξεσουάρ και Αναλώσιμα

200-09201 12" Portable Laptop/Tablet Patient Monitor

200-29301 23" Bedside PC Patient Monitor

325-00450, 325-00450T, 325-00450B Fundus Skills and Assessment Module

325-00550, 325-00550T, 325-00550B Wound Care and Assessment Set

325-00650, 325-00650T, 325-00650B Mastectomy Module

325-00750 Breast Exam Module

205-10150, 205-10150T, 205-10150B Adult IO Leg

Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.vascomedical.gr για πλήρη κατάλογο αναλωσίμων και αξεσουάρ

Εγγύηση 1 έτος

Υπηρεσίες

H Vasco Medical προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης του προϊόντος σας όπως εσείς επιθυμείτε.



ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Vasco Medical
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 36Α - 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 2109834733 - 2109849069 FAX: 2109847016
ΑΦΜ: 046355142 - ΔΟΥ: ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ