



Resusci® Junior QCPR

Περισσότερο ποιοτική εκπαίδευση

Το Resusci® Junior QCPR είναι ένα ολόσωμο πρόπλασμα παιδιού, σχεδιασμένο για την εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Χρησιμοποιείται με επιλεγμένες ηλεκτρονικές συσκευές και παρέχει λεπτομερή αποτελέσματα τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και συγκεντρωτικά αποτελέσματα στην ΚΑΡΠΑ κατά την ανασκόπηση της εκπαίδευσης.

Η τεχνολογία QCPR χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τόσο τους εκπαιδευτές όσο και τους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν και να ελέγξουν αποτελεσματικότερα την απόδοση ΚΑΡΠΑ, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα και την αξία του χρόνου εκπαίδευσης.

Resusci® Junior QCPR

QCPR επιλογές συσκευών




SimPad® PLUS with SkillReporter

Η προτιμώμενη επιλογή ανατροφοδότησης για τον επαγγελματία. Περιλαμβάνει λεπτομερή αποτελέσματα σχετικά με τις παραμέτρους απόδοσης CPR, συμπεριλαμβανομένης της σωστής τοποθέτησης των χεριών, καθώς και καταγραφή συμβάντων χρονολογικά κατά τη διάρκεια της εκπσης. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποθηκευτούν και να εξαχθούν για περαιτέρω επεξεργασία.



SkillGuide

Μικρή, φορητή και ελαφριά συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση ανατροφοδότηση ενός εκπαιδευόμενου στη μέτρηση, παρακολούθηση και βελτίωση των δεξιοτήτων του στην ΚΑΡΠΑ.

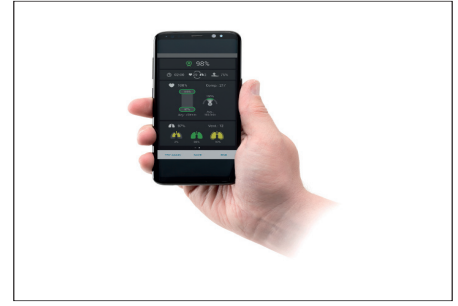

QCPR Learner and QCPR Instructor apps

Σχεδιασμένο για smartphones και tablet, οι εφαρμογές μας Instructor and Learner χρησιμοποιούν έξυπνους αλγόριθμους βαθμολόγησης. Η ασύρματη συνδεσιμότητα και τα ενσωματωμένα βοηθήματα σας επιτρέπουν να τα ρυθμίσετε γρήγορα και εύκολα.



Όλες οι επιλογές ανατροφοδότησης υποστηρίζουν το βάθος συμπίεσης, το ρυθμό συμπίεσης, την επαναφορά, το ποσοστό συμπίεσης, τον ρυθμό αερισμού και τον όγκο αερισμού.



Ρεαλιστική συμπίεση και αερισμός

Η καρδιακή ανακοπή σε ένα παιδί είναι ένα σπάνιο περιστατικό, οπότε η εκμάθηση της σωστής εφαρμογής ΚΑΡΠΑ είναι σημαντική για να μεγιστοποιήσετε την πιθανότητα επιβίωσης κατά τη διάρκεια των κρίσιμων στιγμών της αναζωογόνησης του. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με ειδικούς στην παιδιατρική, με εμπειρία στο παιδιατρικό CPR, για να εξασφαλιστεί ρεαλιστική αντίσταση κατά τη συμπίεση και την κατάλληλη άνοδο του στήθους κατά τον αερισμό. Το Resusci Junior QCPR είναι πλήρως συμβατό με τις κατευθυντήριες οδηγίες.

- Πρακτικό και φορητό - Η τσάντα μεταφοράς μετατρέπεται σε ένα μαλακό και προστατευτικό τάπητα τόσο για το πρόπλασμα όσο και για τον εκπαιδευόμενο.
- Ενσύρματη (skillguide) ή ασύρματη λειτουργία (Simpad, Smartphone)
- Δυνατότητες τροφοδοσίας - έως 40 ώρες λειτουργίας με τέσσερις μπαταρίες AA και δυνατότητα σύνδεσης σε τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος (συμπεριλαμβάνεται καλώδιο USB C σε USB A και προσαρμογέας ρεύματος).
- Κλίση κεφαλής /ανύψωση πηγουνιού /ανάσπαση γνάθου
- Latex Free υλικό για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων. Αεραγωγοί με βαλβίδα αποκλεισμού επαναεισπνοής αέρα για την υγιεινή.
- Αμφίπλευρος καρδιακός παλμός (χειροκίνητος)
- Ρεαλιστική ανατομία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

181-00150

Resusci Junior QCPR - full body with carry bag

181-30010

Replacement Airway x 12



Laerdal
helping save lives

VASCO MEDICAL

Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι
ΤΚ 17455

Tel: +30 210 9834733

Fax: +30 210 9847016

info@vascomedical.gr

www.vascomedical.gr

