


Η λύση στη Στήριξη του Ενδοτραχειακού Σωλήνα

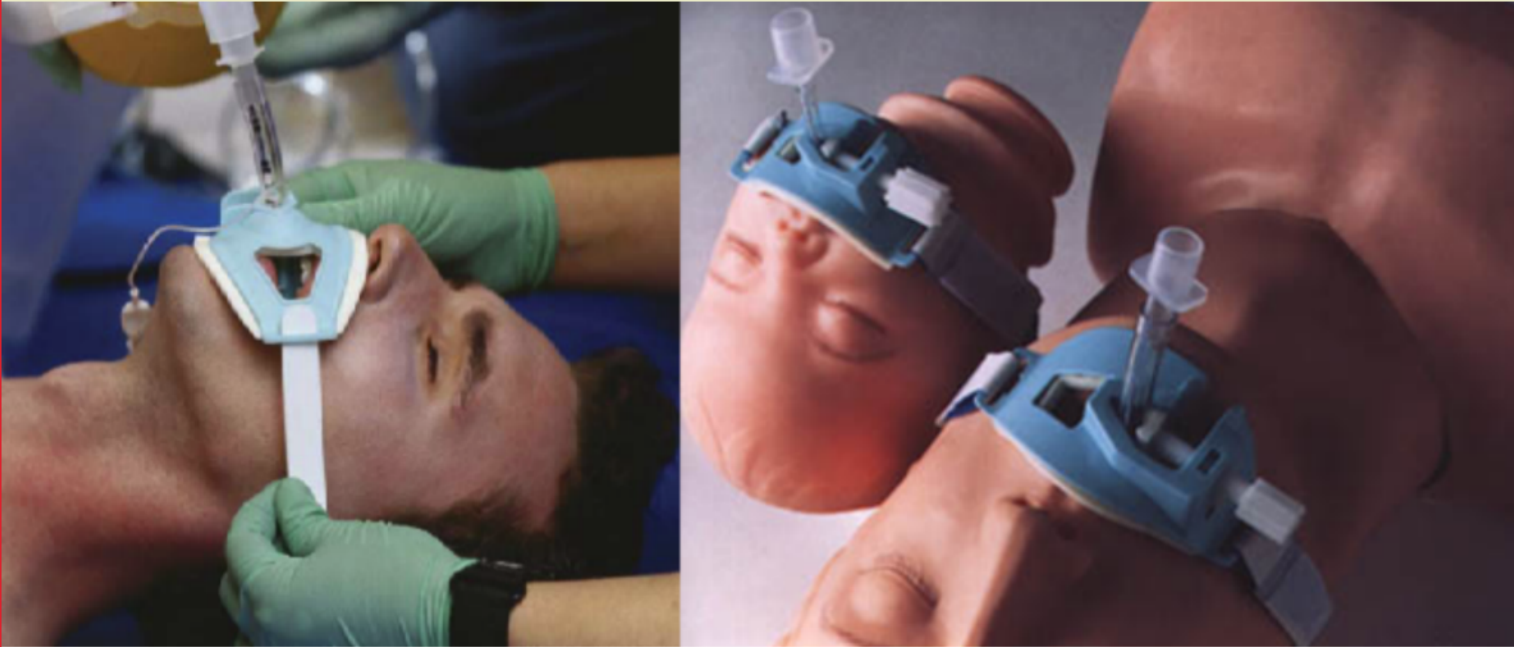

Thomas Tube Holder

Δεν πρέπει πλέον να ανησυχείτε για τις ταινίες στερέωσης ενδοτραχειακών !

Το Thomas Tube Holder είναι η μοναδική συσκευή για την ασφαλή συγκράτηση σωλήνα μετά την τοποθέτησή του.

Σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του δαγκώματος του ενδοτραχειακού σωλήνα καθώς και της τυχαίας μετατόπισής του.

Ασφαλίζει γρήγορα τον Ενδοτραχειακό σωλήνα και επιτρέπει τη γρήγορη επανατοποθέτηση, εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Η συσκευή ακινητοποιεί Combitubes® , Λαρυγγικές Μάσκες, ενδοτραχειακούς σωλήνες, αλλά το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι προστατεύει το δάγκωμα του σωλήνα από τον ασθενή.

Είναι η αποτελεσματικότερη συσκευή για τη συγκράτηση των ενδοτραχειακών σωλήνων στην αγορά.



Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Εύκολη εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> Περιορίζει την ανάγκη για άβολη στερέωση ιμάντα.
Μεγάλο άνοιγμα	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόζεται σε πολλαπλά μεγέθη, ενδοτραχειακών σωλήνων, καθώς επίσης και Combitubes και LMA's. Η συσκευή αερισμού δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί για να συνδεθεί με την συσκευή ΤΤΗ.
Φαρδύς ιμάντας Velcro®	<ul style="list-style-type: none"> Παρέχει ασφαλή και άνετη εφαρμογή, ακόμα και όταν βραχεί. Δεν θα ανοίξει.
Μηχανισμός σετ βίδας	<ul style="list-style-type: none"> Η ενσωματωμένη πλαστική βίδα συγκρατεί τον ενδοτραχειακό σωλήνα με ασφάλεια.
Εμπόδιο δαγκώματος	<ul style="list-style-type: none"> Προστατεύει τα δόντια και τα ούλα των ασθενών, ενόσω διατηρεί τον ενδοτραχειακό σωλήνα ανοικτό.
Μεγάλη τρύπα πρόσβασης στο στόμα	<ul style="list-style-type: none"> Αναρρόφηση υγρών του στοματοφάρυγγα.
Μεγάλη περιοχή επιφάνειας	<ul style="list-style-type: none"> Προσαρμόζεται σε ασθενείς με αφαιρεμένα δόντια ή τραύμα στο πρόσωπο.
Ευπροσάρμοστο	<ul style="list-style-type: none"> Διατίθεται σε μεγέθη ενήλικα και παιδιού.
Άνετο	<ul style="list-style-type: none"> Άνετο ανοικτό κοίλωμα με αφρώδη επένδυση που επιτρέπει στο δέρμα του ασθενή να αναπνέει. Ολισθηρή κολλώδης επιφάνεια επιτρέπει στον ιμάντα να τοποθετηθεί γύρω από το λαιμό του ασθενή γρήγορα, χωρίς μετακίνηση της κεφαλής. Δεν θα πιαστεί στα μαλλιά, ακόμα και εάν βραχεί. Η υποδοχή σωλήνα Thomas είναι αναλώσιμη - μίας χρήσεως.

Η τυχαία μετατόπιση του ενδοτραχειακού σωλήνα (ΕΤΤ) είναι ένας γνωστός κίνδυνος σε διασωληνωμένους ασθενείς. Σχετικά μικρές κινήσεις της κεφαλής και του λαιμού ή απρόσεκτο τράβηγμα σε έναν ενδοτραχειακό σωλήνα μπορεί να έχει ως συνέπεια την απόσπασή του με πιθανές καταστροφικές συνέπειες εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί.

Η παραδοσιακή λύση για τη σταθεροποίηση του ενδοτραχειακού σωλήνα ήταν να τον δέσουν στη θέση του με ταινία γάζας ή να τον ασφαλίσουν στο πρόσωπο του ασθενή με αυτοκόλλητη ταινία. Ωστόσο και οι δύο αυτές μέθοδοι έχουν τα μειονεκτήματά τους. Η ταινία γάζας μπορεί να γλιστρήσει ή να χαλαρώσει και η αυτοκόλλητη ταινία δεν κολλάει πάνω σε γένια και σε υγρά ή ματωμένα πρόσωπα.

Σε μία ενδελεχή έρευνα 426 ασθενών, κατά τη διάρκεια του αερισμού σε μία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, για περίοδο άνω των δύο μηνών, παρατηρήθηκε ότι η χρήση της αυτοκόλλητης ταινίας είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τυχαία εξαγωγή του ενδοτραχειακού, ανεξαρτήτως εάν η ταινία ήταν ή δεν ήταν τυλιγμένη γύρω από το λαιμό του ασθενή και ο επιβλέπων συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή και σφιχτή εφαρμογή του ενδοτραχειακού σωλήνα στους διασωληνωμένους ασθενείς.

Το δάγκωμα του σωλήνα είναι ένας επιπλέον κίνδυνος όταν δεν χρησιμοποιείται ένα μέσο νευρομυϊκής εμπόδισης και αυτή η ακούσια πράξη μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία.

Παρόλο που οι μέθοδοι σταθεροποίησης και προστασίας του ενδοτραχειακού σωλήνα κατά τη διάρκεια της στερεότυπης αναισθησίας είναι καθημερινοί, μπορούν να γίνουν επικίνδυνες.


600-30000 Thomas Tube Holder Adult, Green
600-10000 Thomas Tube Holder Adult
600-20000 Thomas Tube Holder Pediatric



ΕΝΗΛΙΚΕΣ



ΠΑΙΔΙΑ

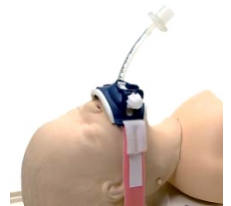

Vasco Medical
Ταξιαρχών 36^α - Αλιμος
17455 Αθήνα
Τηλ.: 210 9834 733 - Fax : 210 9847 016



Laerdal[®]
helping save lives

e-mail : info@vascomedical.gr